



Fusion NEW

Multifocal

Мультифокальные мягкие контактные линзы
для коррекции зрения на всех расстояниях

Идеальны для пациентов
с первыми признаками
снижения зрения вблизи

OK VISION®

МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ МУЛЬТИЗАДАЧНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Fusion NEW Multifocal




ДИЗАЙН

Асферический дизайн High Definition Control компенсирует сферические аберрации, способствует стабилизации периферического зрения и высокую остроту зрения даже в тёмное время суток

МАТЕРИАЛ

Отлично сбалансированный по гидрофильности, кислородопроницаемости и модулю упругости силикон-гидрогелевый материал последнего поколения Иннофилкон А способствует проникновению кислорода к роговице напрямую через линзу и обеспечивает насыщение роговицы кислородом на 98%

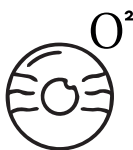

УВЛАЖНЕНИЕ

Оптимальное содержание гидрофильного компонента в линзах прекрасно увлажняет глаза, препятствует отложению депозитов на поверхности контактной линзы

КРАЙ ЛИНЗЫ

Закруглённый безопасный край линзы не нарушает обмен слезы в подлинзовом пространстве и не погружается в конъюнктиву, так как находится параллельно ей



ЦЕНА – КАЧЕСТВО

Самое доступное средство коррекции зрения при пресбиопии, гарантирующее высокое качество жизни, зрительную свободу и лёгкий период адаптации

1

Более мягкий переход* оптической силы от центра к краям линзы обеспечивает чёткое зрение на каждом промежуточном отрезке


2

Fusion NEW Multifocal - одинаково безупречное качество зрительного восприятия на всех трёх расстояниях: вдаль, на среднем расстоянии и вблизи

БЛИЖНЯЯ ЗОНА

СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ

ДАЛЬ

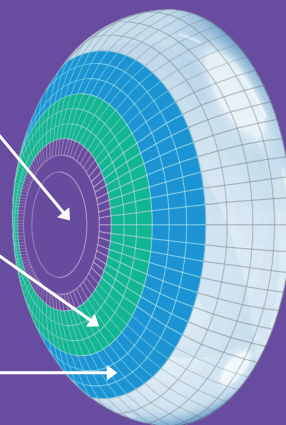

• ВЫСОКАЯ КИСЛОРОДПРОНИЦАЕМОСТЬ

Комфортное ношение на весь день

• ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ

Материал отлично сохраняет форму линзы и дарит легкость при снятии и надевании

• ВЫСОКАЯ УФ-ЗАЩИТА

Защищают от UV-A и UV-B лучей

* по сравнению с мультифокальными МКЛ других производителей

Fusion NEW

Multifocal

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Иннофилкон А

Режим ношения: дневной (возможен гибкий пролонгированный)

Метод изготовления: Cast mold (формование)

Содержание воды: 45%

Толщина в центре (-3,0): 0,08 мм

Кислородопроницаемость 125×10^{-9}

Радиус кривизны: 8,6 мм

Диаметр: 14,2 мм

Диапазон рефракций: от -0.0 D до -6.0 D (шаг 0.25 D),

от +0.5 D до +6.0 D (шаг 0.5 D)

Аддидация +1.0 D, +1.5 D, +2.0 D, +2.5 D

Защита от ультрафиолета: да

Закругленный край

Режим ношения: дневной

Упаковка: 6 блистеров

Срок замены: 1 месяц

Ощутите зрительную свободу,
закажите ваши мультифокальные
мягкие контактные линзы у нас:

НАЗВАНИЕ ОПТИКИ / КЛИНИКИ

ТЕЛЕФОН

АДРЕС

ВАШ ОФТАЛЬМОЛОГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА